

CAMBIO DE CASSETTE DIARIO

ANTES DE COMENZAR CON LA MÁQUINA, EL CASSETTE DEBE ESTAR LISTO. LLENO CON LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CONTROLADO QUE NO TIENE NINGUNA BURBUJA DE AIRE, PINZADO Y CON EL TAPÓN ROJO COLOCADO QUE INDICA QUE ESTA LISTO PARA USARSE.

1º PINZAR TODOS LOS TRAMOS.

2º **PARAR** LA MÁQUINA. MANTENER PULSADO BOTON **PARADA/INICIO** HASTA QUE SALGAN LOS TRES GRUPOS DE RAYAS _____ Y EN PANTALLA PONDRÁ **PARADA**.



3º DESCONECTAR EL CABLE DEL CASSETTE DEL ALARGADOR DEL CATETER, QUITAR EL CASSETTE VACIO Y COLOCAR EL NUEVO, CONECTARLO AL ALARGADOR Y DESPINZAR TODO EL CABLE, SIEMPRE DESDE EL PACIENTE HACIA LA BOMBA.

4º PONER DE NUEVO LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO SIGUIENDO ESTE PROCESO: PULSAR EL BOTON **SIGUIENTE** PARA VER LOS DATOS QUE DEBE TENER LA MÁQUINA.



LO PRIMERO QUE SALE ES VOLUMEN DE RECIPIENTE QUE DEBE SER 50 o 100 ml. PARA PONERLO A ESA CANTIDAD PULSAR BOTON **ENTRADA/ANULAR**



UNA VEZ PUESTO VOLVER A PULSAR EL BOTON **SIGUIENTE** Y AHORA SALDRÁ LA TASA CONTINUA QUE ES LA CANTIDAD DE MEDICACIÓN QUE EL MÉDICO PONE. ÉSTA NO SE PUEDE CAMBIAR Y VOLVEMOS A PULSAR EL BOTON **SIGUIENTE**. AHORA SALE ADMINISTRADO QUE ES UN VALOR QUE DEBE SER 0,00 ml. PARA PONER A 0,00 ml PULSAR BOTON **ENTRADA/ANULAR** Y VOLVEMOS A PULSAR **SIGUIENTE**. AHORA NOS SALE DETECTOR DE AIRE DESACT Y LO DEJAMOS ASI PULSANDO DE NUEVO **SIGUIENTE** Y SALDRÁ SENSOR DE LINEA DESACT Y TAMBIÉN LO DEJAMOS ASÍ Y PULSAMOS **SIGUIENTE** PARA FINALIZAR Y LA MÁQUINA MARCARÁ **PARADA** EN LA PANTALLA.

5º YA ESTA LISTA PARA EMPEZAR A FUNCIONAR. SOLO TENDREMOS QUE MANTENER PULSADO BOTON **PARADA/INICIO**



HASTA QUE SE QUITEN LOS GRUPOS DE RAYAS _ _ _ _ _ Y ENTONCES VOLVERÁN A SALIR DE NUEVO TODOS LOS DATOS METIDOS COMO COMPROBACIÓN Y LA PANTALLA QUEDARÁ CON ESTOS DATOS:

FUNC VolRec 100,0 ml

LA MÁQUINA ESTA FUNCIONANDO.


ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MÁQUINA

ENCENDER LA MÁQUINA MANTENIENDO PULSADO EL BOTON **ACT/DESACT**.



EMPIEZAN A SALIR UNOS DATOS EN LA PANTALLA Y HACE UN DIAGNOSTICO. FINALMENTE EN LA PANTALLA APARECE LA PALABRA **PARADA**.

APAGAR LA MÁQUINA. LA MÁQUINA ESTARÁ FUNCIONANDO POR LO QUE HABRÍA QUE PARARLA PRIMERO EN EL BOTON **PARADA/INICIO** HASTA QUE SALGAN LOS _____ Y EN PANTALLA PONGA **PARADA**. LUEGO PULSAR **ACT/DESACT** HASTA QUE SALGAN LOS @@@@ @@@@ @@@@ Y YA SE APAGA LA PANTALLA.

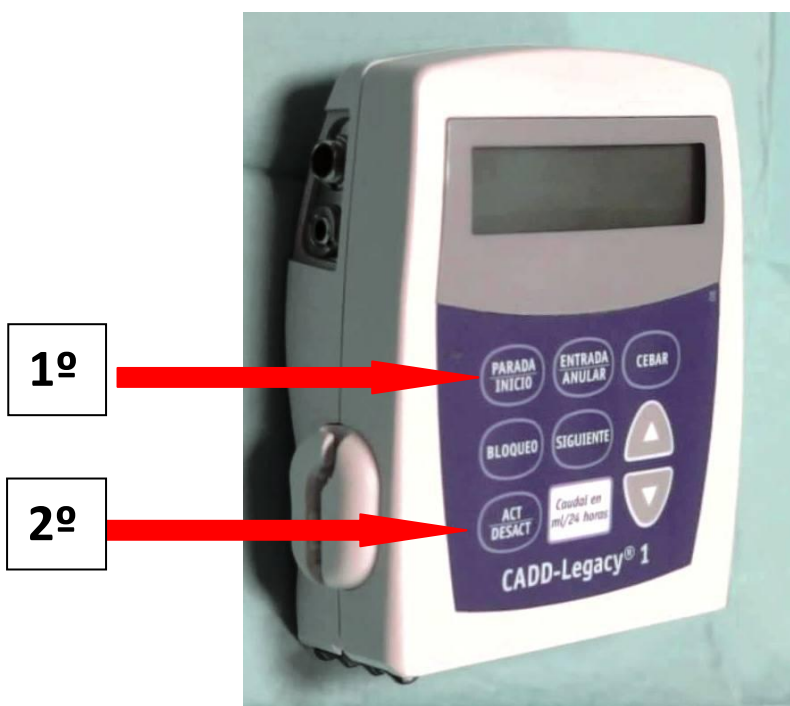

CAMBIO SEMANAL DE MÁQUINA Y ALARGADOR DE CATETER

CADA SEMANA ES NECESARIO CAMBIAR DE MÁQUINA PARA SABER QUE AMBAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y DE ALARGADOR DE CATETER PARA LIMPIEZA Y EVITAR POSIBLES INFECCIONES.

CUANDO TENGAMOS EL AVISO DE QUE SE GASTA EL MEDICAMENTO DE LA BOMBA, TENEMOS QUE COGER LA OTRA MÁQUINA QUE TENDRÁ COLOCADAS LAS PILAS NUEVAS, EL CARTUCHO CARGADO Y EL CABLE DEL CARTUCHO NUEVO DEBE ESTAR CONECTADO AL NUEVO ALARGADOR DE CATETER VERIFICANDO LOS SIGUIENTES DATOS:

VOLUMEN DE RECIPIENTE QUE DEBE SER 50 o 100 ml. PARA PONERLO A ESA CANTIDAD PULSAR BOTON **ENTRADA/ANULAR Y PULSAR **SIGUIENTE**.**

TASA CONTINUA QUE ES LA CANTIDAD DE MEDICACIÓN QUE EL MÉDICO PONE. ÉSTA NO SE PUEDE CAMBIAR Y VOLVEMOS A PULSAR EL BOTON **SIGUIENTE.**

ADMINISTRADO ES UN VALOR QUE DEBE SER 0,00 ml. PARA PONER A 0,00 ml PULSAR BOTON **ENTRADA/ANULAR Y VOLVEMOS A PULSAR **SIGUIENTE**.**

DETECTOR DE AIRE DESACT Y LO DEJAMOS ASI PULSANDO DE NUEVO **SIGUIENTE Y SALDRA SENSOR DE LINEA DESACT Y TAMBIÉN LO DEJAMOS ASÍ Y PULSAMOS **SIGUIENTE** PARA FINALIZAR Y LA MÁQUINA MARCARÁ PARADA EN LA PANTALLA ESTANDO LISTA PARA EMPEZAR A FUNCIONAR.**

VERIFICAR DONDE VA CADA PUNTA DEL NUEVO ALARGADOR DE CATETER.

1º ANTES DE CONECTAR LA NUEVA MÁQUINA HAY QUE CEBAR EL NUEVO ALARGADOR DE CATETER PARA QUE LA MEDICINA LLEGUE A LA PUNTA Y NO QUEDE AIRE DENTRO. LA MÁQUINA DEBE TENER EN LA PANTALLA LA PALABRA **PARADA.**

SE UTILIZA EL BOTON **CEBAR** DE LA MÁQUINA



Y MANTENDREMOS APRETADO ESTE BOTON HASTA QUE SALGAN LOS SÍMBOLOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Y EN LA PANTALLA PONDRÁ **CEBANDO**. LEVANTAMOS EL DEDO Y VOLVEMOS A PULSAR MIENTRAS SE ESCUCHA QUE LA MÁQUINA EXPULSA VARIAS VECES SEGUIDAS MEDICINA QUE IRÁ LLENANDO LA GOMA. HABRÁ QUE PULSAR VARIAS VECES ESTE BOTON HASTA QUE SE LLENE COMPLETAMENTE EL ALARGADOR.

UNA VEZ TERMINADO ESTE CEBADO, EN LA PANTALLA DE LA MÁQUINA QUEDARÁ LA PALABRA **PARADA** EN ESPERA DE COMENZAR A FUNCIONAR.

2º NO SE PUEDE OLVIDAR PINZAR EL CATETER QUE SALE DEL PECHO.

3º AHORA QUITAMOS LA MÁQUINA CON EL CASSETTE GASTADO Y EL ALARGADOR ANTIGUO. CONECTOR ALARGADOR MORADO A CATETER PECHO Y AZUL A CASSETTE MÁQUINA.

4º CONECTAMOS LA MÁQUINA CON LAS PILAS NUEVAS, EL CASSETTE CARGADO Y EL NUEVO ALARGADOR Y ESTA MÁQUINA, DESPUDES DE HABER CEBADO, TENDRÁ EN LA PANTALLA LA PALABRA **PARADA**.

5º DESPINZAMOS TODO EL CABLE.

6º PARA EMPEZAR A FUNCIONAR SOLO TENDREMOS QUE MANTENER PULSADO BOTON **PARADA/INICIO** HASTA QUE EN LA PANTALLA SALGAN ESTOS DATOS: **FUNC VolRec 100,0 ml** LA MÁQUINA YA ESTA FUNCIONANDO.



7º TAPAR TODAS LAS CONEXIONES CON GASAS Y ANTISÉPTICO NO OLVIDANDO DEJAR UN TRAMO DISPONIBLE PARA DESPEGAR LOS ADHESIVOS DE LAS GASAS. NO UTILIZAR TIJERAS NI ARTICULOS PUNZANTES.

8º APAGAR MAQUINA QUE SE QUITA EN BOTON **ACT/DESACT** MANTENIENDOLO PULSADO, QUITAR PILAS Y QUITAR Y TIRAR EL ALARGADOR ANTIGUO Y CASSETTE ANTIGUO. VOLVER A TENERLA LISTA ANTES DE LA PRÓXIMA SEMANA.